


DIVASHAPE[®]



• CRIOCONTOUR

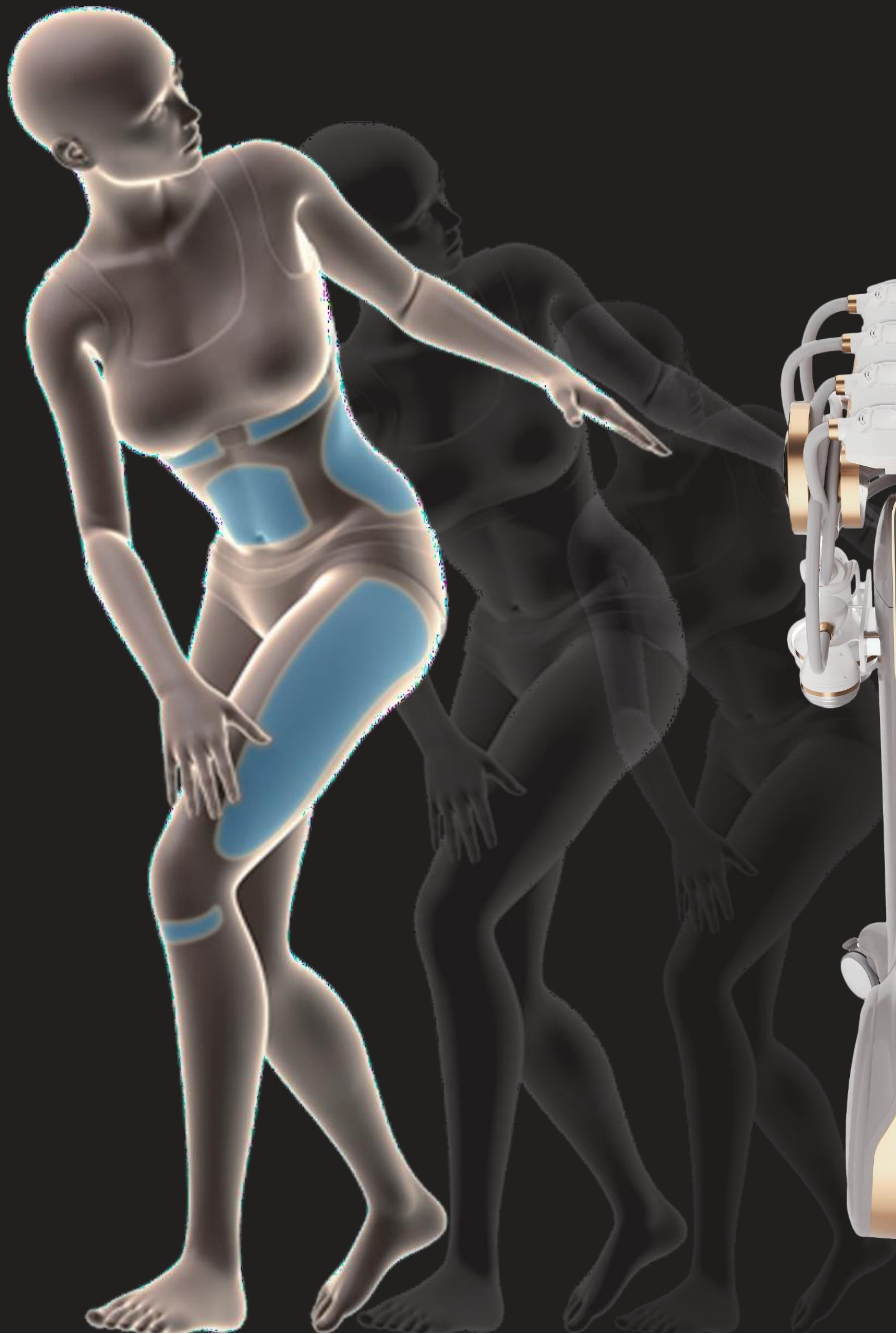


Замораживание
жира

• ULTRA IMPACT



Расщепление
жира

• MICROWAVES

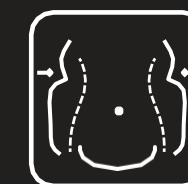

Уменьшение
жировых
отложений

• TRIPLEX 510



Наращивание
мышечной массы
и коррекция фигуры

Аппарат **DIVASHAPE** максимально повышает эффективность, выборочно воздействуя на жировые клетки, тем самым способствуя уменьшению целлюлита, дряблости кожи и формированию мышц. Процедуры на данном аппарате обеспечивают комплексный уход за кожей лица и тела и оптимизирует результаты.



СНИЖЕНИЕ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Глубоко разрушает мембраны подкожно-жировых клеток. Образовавшийся лизат затем выводится с помощью естественных метаболических процессов.



СГЛАЖИВАНИЕ ЦЕЛЛЮЛИТА

Воздействует на соединительную ткань между жировыми долями целлюлита.



ПОДТЯЖКА КОЖИ

Немедленное сокращение коллагеновых волокон дермы и стимуляция продукции новых коллагеновых волокон делают ткани упругими и подтянутыми.



НАРАЩИВАНИЕ МЫШЕЧНОЙ МАССЫ И КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ

Стимулирует поверхностные или глубокие мышцы для достижения практически безболезненного сокращения. Ускорение восстановления и наращивания мышц.




ГЛУБОКОЕ / ПОВЕРХНОСТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

**ФОКУСИРОВКА ЭНЕРГИИ
ТОЛЬКО В ТКАНЯХ ПОДКОЖНОЙ ЖИРОВОЙ
КЛЕТЧАТКИ**

Интегрированная система охлаждения

Контактная система охлаждения кожи интегрирована в манипулу и компенсирует тепло, вызванное микроволнами. Поверхностный слой дермы остается неизменным, обеспечивая полный комфорт клиента и предотвращая побочные эффекты и воспаление.

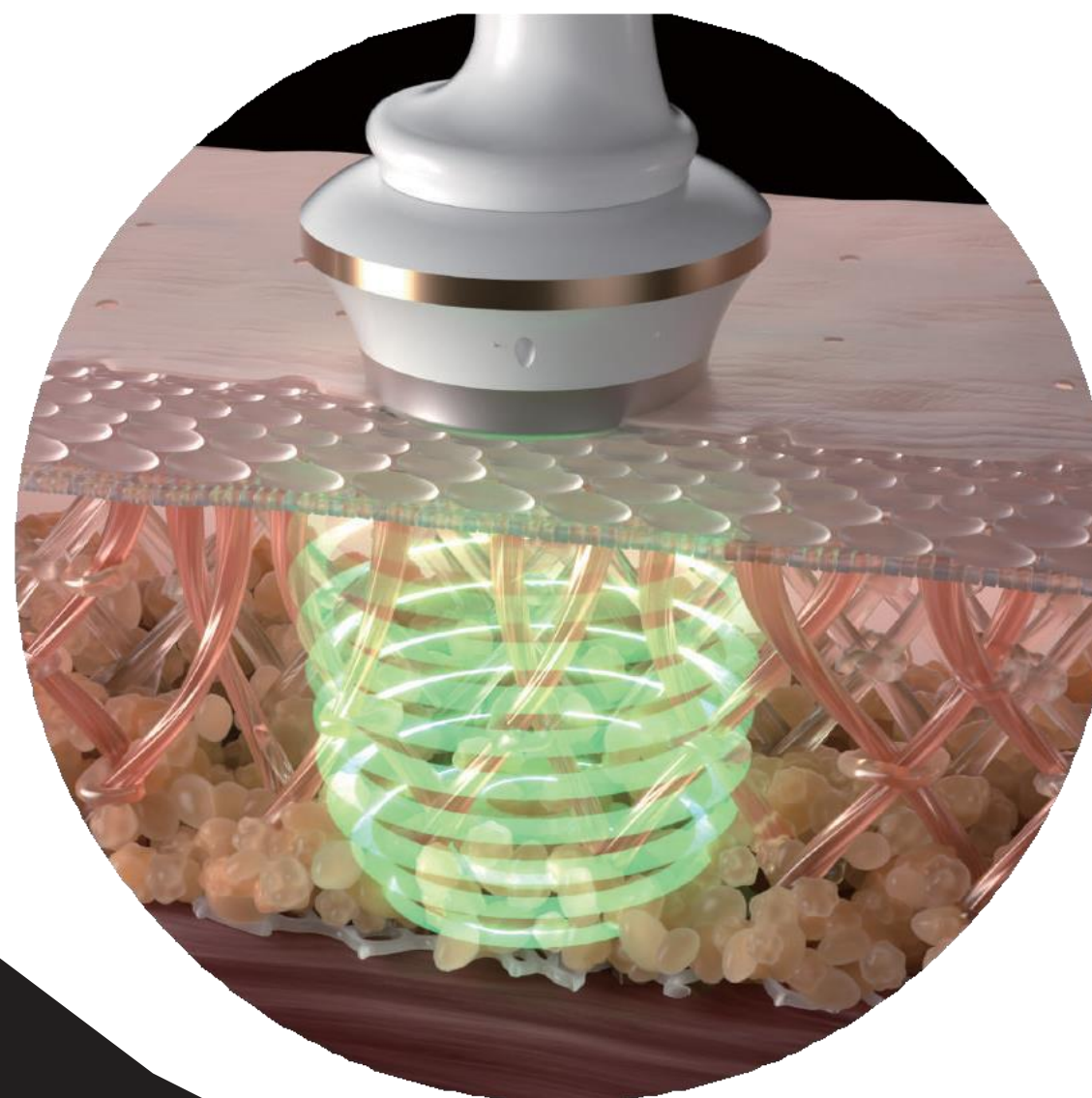

МИКРОВОЛНЫ тройного действия

ЛИФТИНГ КОЖИ

Микроволны оказывают действие на ткани избирательно и оказывают сильное разглаживающее воздействие на кожу лица, создавая мощный эффект лифтинга.


ПОДТЯЖКА КОЖИ

Глубокое воздействие на дерму приводит к немедленному сокращению коллагеновых волокон, а выработка нового коллагена делает ткани упругими и подтянутыми.

СЖИГАНИЕ ЖИРА

Микроволны глубоко разрушают мембраны подкожно-жировых клеток. В результате достигается точечное моделирование контуров тела и лица.

Разная глубина воздействия для разных процедур

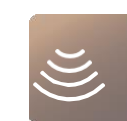

Воздействие на глубокие слои

Лучше всего подходит для устранения локальных жировых отложений при целлюлите



Воздействие на поверхностные слои

Лучше всего подходит для подтяжки кожи лица



ULTRA IMPACT[®]

БЕСЦЕНТРОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Повышенная безопасность и производительность

Интегрированная система охлаждения

Контактная система охлаждения кожи интегрирована в манипулу и нейтрализует тепло, индуцированное фокусированными ультразвуковыми микроволнами. Поверхностный слой дермы остается неизменным, обеспечивая полный комфорт клиента и предотвращая побочные эффекты и воспаление.


1

2^в

УЛЬТРАФОКУС + МОНОПОЛЯРНАЯ ДСМ

Динамическая стимуляция мышц

Укрепляет, тонизирует и уплотняет мышцы лица и тела (мышцы живота, ягодиц и бедер).

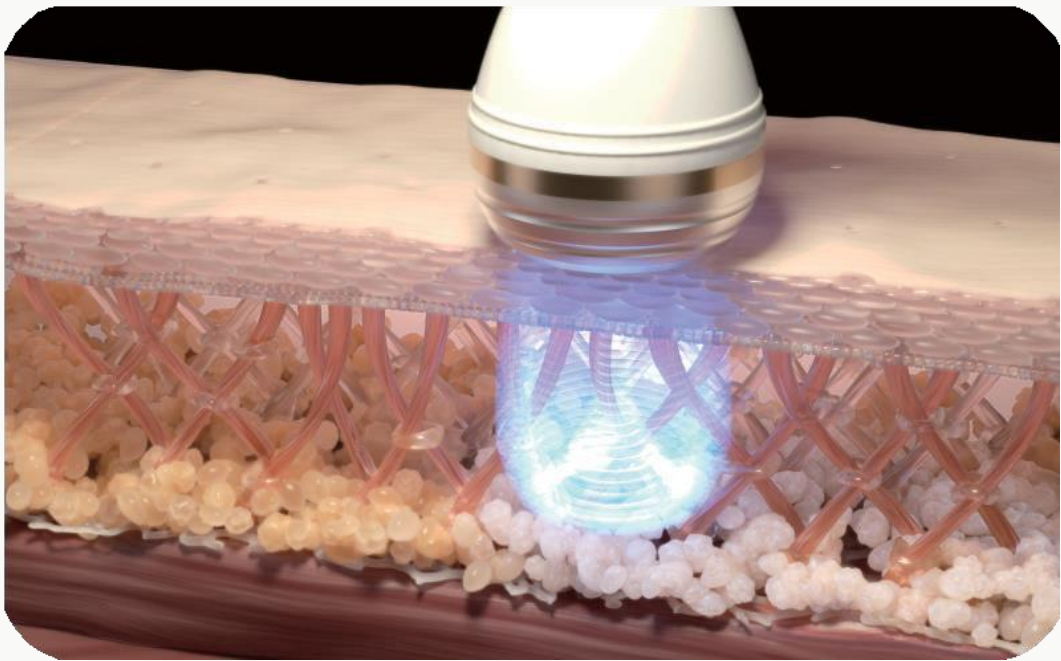


МОНОПОЛЯРНАЯ ДСМ

Индивидуальная обработка различными манипулами

Существуют различные виды манипул для обработки кожи лица и тела

Благодаря усиленной концентрации энергии манипула для тела воздействует на подкожный слой на двух разных глубинах, обеспечивая коррекцию фигуры и подтяжку кожи тела.


Манипула	1,5 мм	3,0 мм	4,5 мм	8,0 мм	13,0 мм
Область	Лицо	Лицо	Лицо	Тело	Тело
Частота	7 МГц	7 МГц	7 МГц	4 МГц	4 МГц

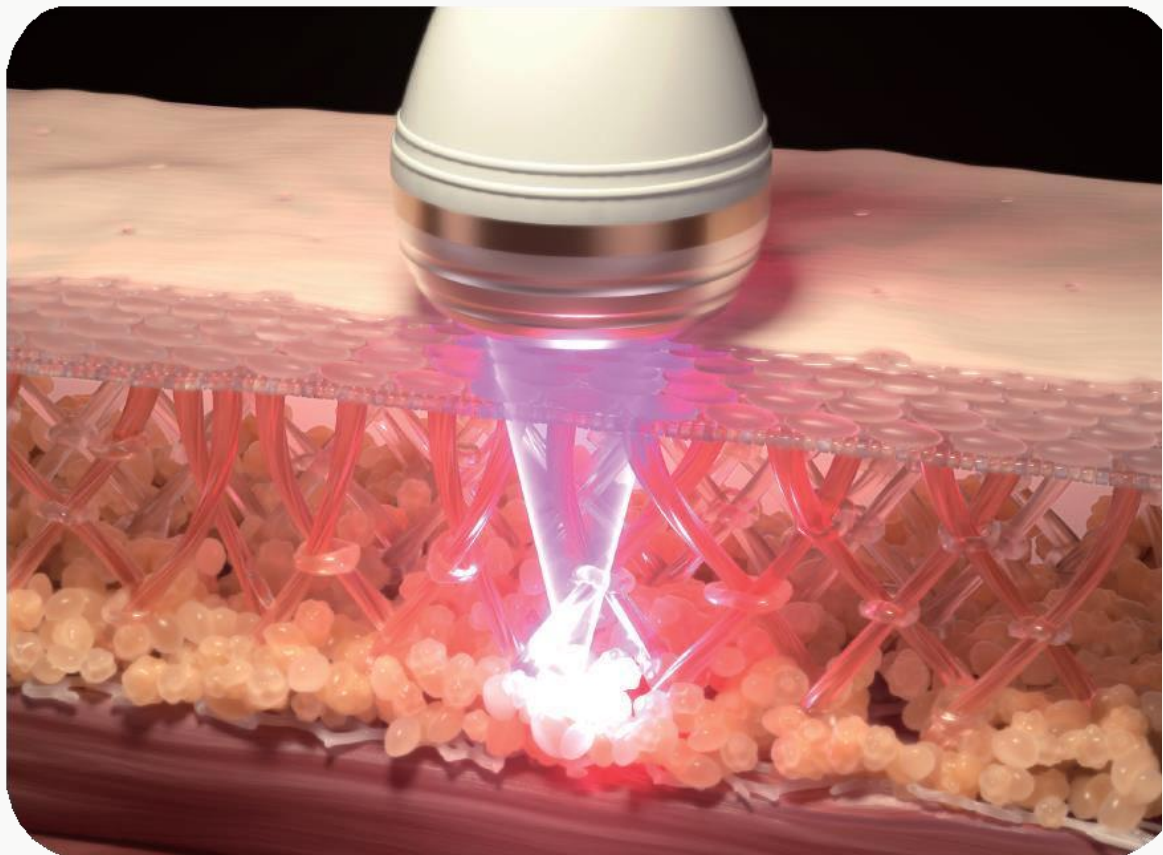

БЕСЦЕНТРОВЫЙ УЛЬТРАФОКУС


АНТИЦЕЛЛЮЛИТ- НЫЙ ЭФФЕКТ

Целлюлит представляет собой комплексное заболевание, при котором присутствуют воспаление, задержка жидкости и отек тканей. Быстрое **НАГРЕВАНИЕ/ОХЛАЖДЕНИЕ** стимулирует лимфатическую систему и уменьшает проявление целлюлита всего за несколько сеансов.

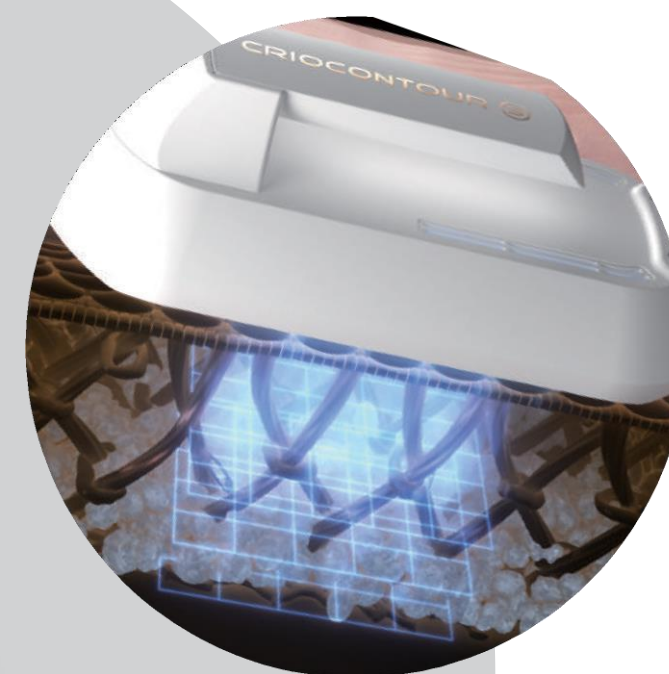

СНИЖЕНИЕ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Посредством чередования **НАГРЕВАНИЯ** и **ОХЛАЖДЕНИЯ** аппарат оказывает сильное воздействие на ткани, уменьшая стойкие жировые отложения. Несколько таких процедур приведут к эффекту похудения.

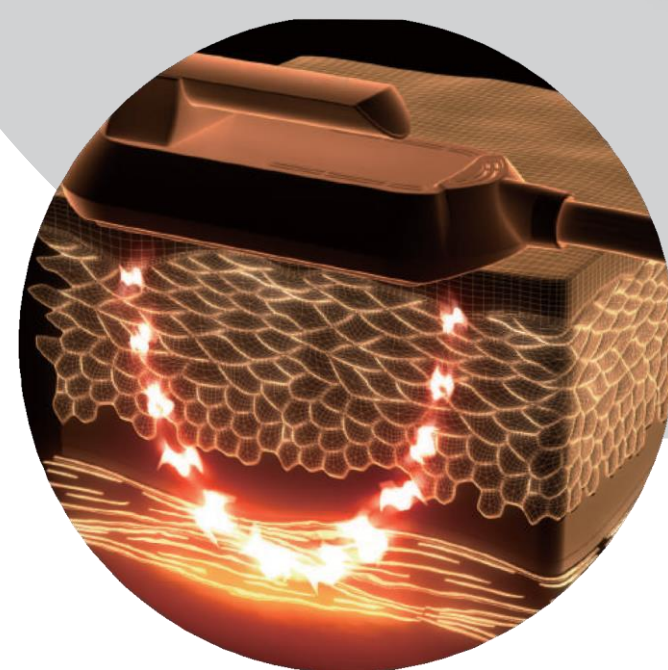

РАССЛАБЛЕНИЕ МЫШЦ

Динамическая стимуляция мышц обеспечивает полезное произвольное упражнение, выполняемое путем сокращения и расслабления мышц. Скоординированное воздействие **ТЕПЛОМ** и **ХОЛОДОМ** стимулирует продукцию эластиновых и коллагеновых волокон, вызывает вазоконстрикцию и вазодилатацию, что улучшает тонус мышц.


TRIPLEX 510

НАРАЩИВАНИЕ МЫШЕЧНОЙ МАССЫ И КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ Тройной эффект



СНИЖЕНИЕ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Низкочастотные ультразвуковые колебания (с частотой 510 кГц) активируют естественное удаление висцерального и подкожного жира и стимулируют глубокий естественный дренаж. В частности, это усиливает кровообращение, уменьшает задержку воды в тканях и регенерацию клеток.

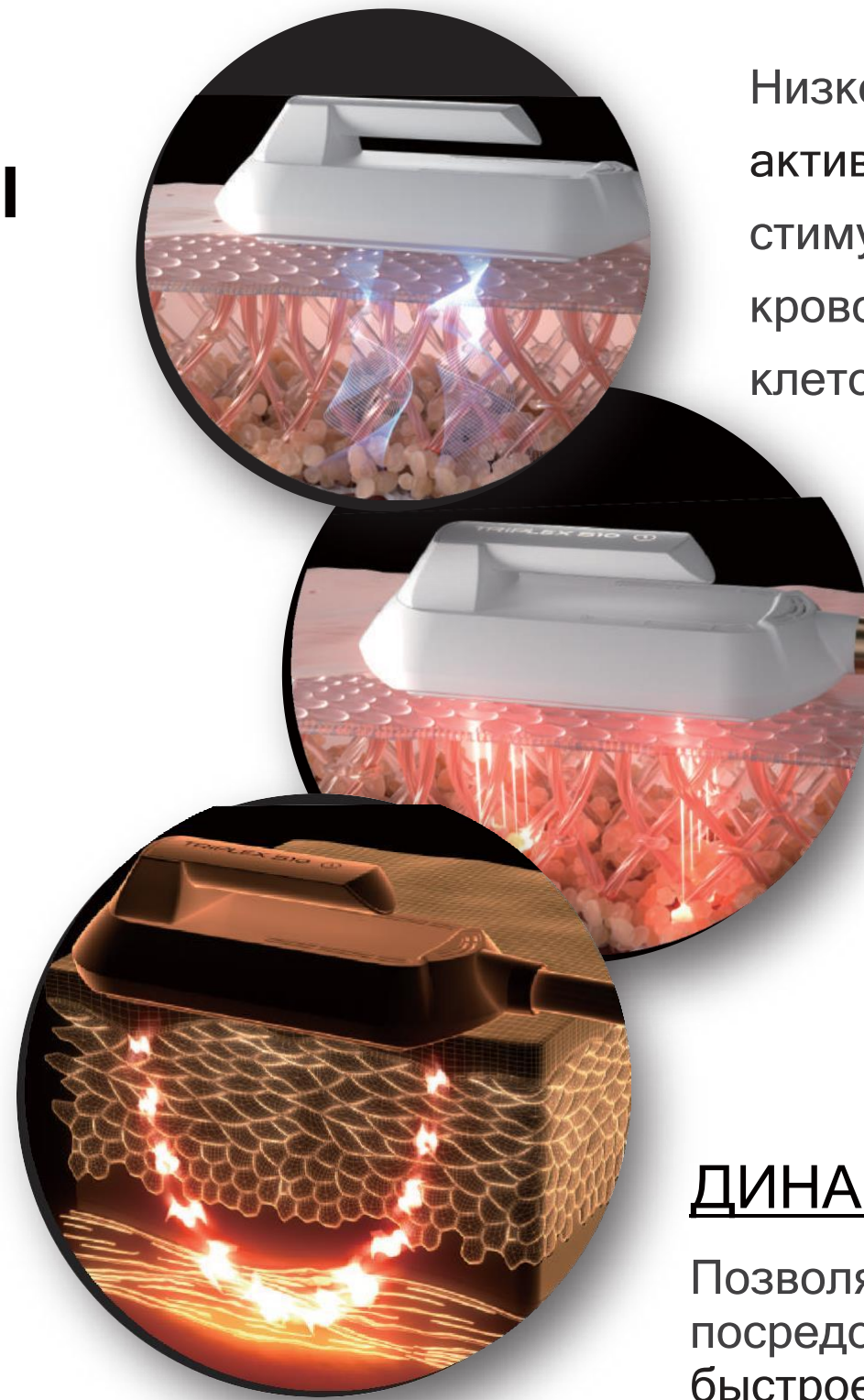

НИЗКОУРОВНЕВЫЙ ЛАЗЕР

Лазер длиной волны 658 нм разжижает жировые клетки, образуя временные поры в их мембранах. Разжиженные жировые клетки полностью разрушаются, что приводит к уменьшению жировых отложений.

ДИНАМИЧЕСКАЯ СТИМУЛЯЦИЯ МЫШЦ

Позволяет выполнять динамическую стимуляцию мышц (ДСМ) посредством модулированного электрического тока. Это вызывает быстрое сокращение и расслабление мышц. В соответствии с целью процедуры можно применять 5 различных видов программ.

5 индивидуальных программ ДСМ



Массаж



Поколачивание



Разминание



Акупрессура



Автоматический режим




4D

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ



DIVASHAPE®

НОВЕЙШИЕ системы для
контурирования лица и коррекции фигуры

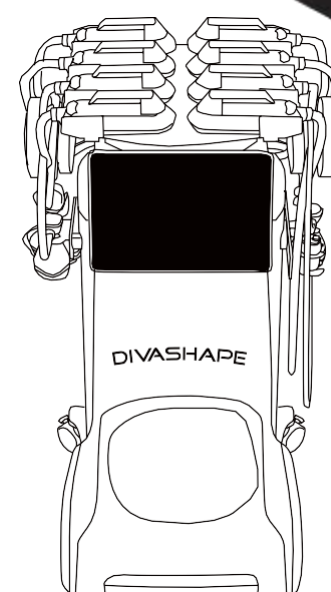

MICROWAVES

Источник	Микроволны
Частота	2,45 ГГц
Мощность	До 200 Вт
Манипулы	Для глубокой/поверхностной обработки
Охлаждение манипулы	Интегрированная система охлаждения

ULTRA IMPACT

Источник	УЗ с бесцентровым фокусом / ДСМ
Частота	4 МГц-7 МГц/1000 Гц
Энергия	макс. 3,0 Дж
Манипулы	1,5 - 3,0 - 4,5 - 8 - 13
Охлаждение манипулы	Интегрированная система охлаждения

CRIOCONTOUR

Источник	Водяное охлаждение / ДСМ
Температура	-10°C
Манипула	Силиконовая с защитой кожи
Частота	1000 Гц

TRIPLEX 510

Источник	Низкочастотный ультразвук / ДСМ
Частота	510 кГц - 635 нм - 1000 Гц
Манипула	Силиконовые ультрапреобразователи

Размеры и вес	110 см х 80 см х 56 см, 60 кг
Электротехнические требования	100-240 В перем. тока, 50/60 Гц, 1500 Вт